

Instrukcja użytkowania

Instructions for use



Próżniowy system pozycjonujący do stabilizacji tułowia, kończyn i głowy, Therapy Stabilo System

Positioning
Therapy Stabilo System



Typ

Flat Velcro
Banana Velcro
Roll Velcro
Wedge Velcro



Dziękujemy, że wybraliście Państwo nasz produkt. Firma NOEL Żebrowski sp. j. zaprojektowała i wykonała Therapy Stablio System mając na uwadze potrzeby funkcjonalne i bezpieczeństwo użytkownika. Mamy nadzieję, że nasze wyroby spełnią Państwa oczekiwania. Niniejsza instrukcja użytkowania jest integralną częścią wyrobów próżniowego systemu pozycjonującego do stabilizacji tułowia, kończyn i głowy, Therapy Stablio System. Proszę koniecznie przeczytać całość instrukcji przed rozpoczęciem używania niniejszego wyrobu.

Thank you for choosing our product. NOEL Żebrowski sp. j. has designed and manufactured Therapy Stablio System to the highest safety and functional use standards. We are confident that our product will meet your highest requirements and expectations. These instructions for use are an integral part of vacuum positioning system stabilizing torso, limbs and head, Therapy Stablio System. Please read the instructions thoroughly before using the product.

Próżniowy system pozycjonujący do stabilizacji tułowia, kończyn i głowy, Therapy Stablio System

Vacuum positioning system stabilizing torso, limbs and head, Therapy Stablio System

Próżniowy system pozycjonujący Therapy Stablio System jest wyrobem przeznaczonym dla dzieci i dorosłych z mózgowym porażeniem oraz przepukliną oponowo-rdzeniową. Therapy Stablio System - zespół poduszek, kształtek terapeutycznych pomaga w ustabilizowaniu pacjenta. W zależności od potrzeb poduszki umożliwiają podparcie wybranych części ciała.


Vacuum Positioning Therapy Stablio System is a product designed for children and adults with cerebral palsy and myelomeningocele. Positioning Therapy Stablio System - a set of cushions and therapeutic fittings helps to stabilize the patient. Depending on the needs, the cushions allow you to support selected parts of the body.


WSKAZANIA

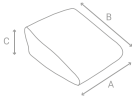
- porażenie mózgowe
- przepuklina oponowo-rdzeniowa
- zniekształcenia tułowia
- wiotkość

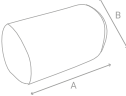
INDICATIONS

- cerebral palsy
- myelomeningocele
- torso distortions
- flaccidity

Fiat Velcro	Typ Type	Wymiary [cm] Dimensions [cm]		
		A	B	C
	M	80	50	6
	L	100	50	8

Banana Velcro	Typ Type	Wymiary [cm] Dimensions [cm]	
		A	B
	S	50	25
	M	55	35
	L	80	35

Wedge Velcro	Typ Type	Wymiary [cm] Dimensions [cm]		
		A	B	C
	M	40	40	25
	L	45	60	40

Roll Velcro	Typ Type	Wymiary [cm] Dimensions [cm]	
		A	B
	S	50	25
	M	50	35
	M+	80	18
	L	80	25
	XL	80	35

Poduszki typu Therapy Stablio System pokryte są specjalnym materiałem wierzchnim umożliwiającym przymocowanie pasków rzepowych.

Therapy Stablio System cushions are covered a special outer material that allows attaching velcro strips.

OSTRZEŻENIA

- poduszka Therapy Stablio System powinna być trwale zapięta do siedziska czy oparcia, jeżeli tak jest używana
- w razie potrzeby zwiększonej wentylacji ciała stosować przewiewny podkład
- unikać ostrych przedmiotów mogących uszkodzić powłokę
- nie używać do mycia środków na bazie rozpuszczalników, np. toluenu, acetonu
- nie ciągnąć za zaworek
- nie nadmuchiwać poduszki

PRODUCT SAFETY WARNINGS

- positioning Therapy Stablio System must be securely fixed to seats or backrests
- use of airy cover is advisable if increased ventilation is required around the body
- avoid contact with sharp objects that may damage the cushion
- do not clean using solvent-based cleaners, e.g. toluene or acetone
- do not pull on valve
- do not overinflate cushion

- używać tylko specjalnej pompki dołączonej do poduszki
- nie prasować za pomocą żelazka
- w przypadku rozprucia, z poduszki mogą wydostawać się mikrogranulki niebezpieczne dla małych dzieci
- nie zezwalać na użytkowanie osobom, które nie zostały uprzednio odpowiednio poinstruowane lub przeszkolone

PRZECIWSKAZANIA

Dopuszczalny ciężar użytkownika 80 kg

UWAGA

- naturalnym zjawiskiem jest zmniejszenie grubości poduszki w początkowym okresie użytkowania o 5%
- przy dużych zmianach temperatury należy dodatkowo ponownie użyć pompki do uzyskania właściwej twardości (wzrost temperatury: poduszka mięknie, spadek temperatury: poduszka twardnieje)

SPOSÓB UŻYCIA

Pompka ręczna

1. Wyciągnij wężyk znajdujący się w rękojeści pompki.
2. Wkręć wężyk w zaworek poduszki i poczekaj, aż poduszka będzie dostatecznie miękka.
3. Wstępnie ukształtuj poduszkę (ręcznie do potrzebnego kształtu lub np. siadając albo opierając się o nią).
4. Dokręć pompkę do wężyka i odessij powietrze do momentu uzyskania żądanej twardości.
5. Odkręć wężyk pompki i zakręć kapturek zabezpieczający na zaworku.
6. Dla zmiany kształtu - wkręć sam wężyk do zaworka, odczekaj aż poduszka zmięknie, a następnie powtórz punkty od 2 do 5.



Pompka elektryczna

1. Wyciągnij wężyk znajdujący się w opakowaniu z pompką elektryczną.
2. Odkręć kapturek zaworka, wkręć gwintowaną część wężyka w zaworek poduszki, drugą część wcisnij w gniazdo SOFT i włącz pompkę. Poczekaj, aż poduszka będzie dostatecznie miękka, następnie wyłącz pompkę.
3. Wstępnie ukształtuj poduszkę (ręcznie do potrzebnego kształtu, lub np. siadając albo opierając się o nią).
4. Zmień położenie wężyka w pompce z SOFT na HARD i włącz ją, aby odessać powietrze do momentu uzyskania żądanej twardości.
5. Odkręć wężyk i zakręć kapturek zaworka.
6. Dla zmiany kształtu powtórz punkty od 2 do 5.



- use only special pump included with cushion for inflation
- do not iron
- in case of tear, micro-granules may escape which may be dangerous for small children
- only persons who received instructions or training may use the device

CONTRAINDICATIONS

Permitted user weight 80 kg

ATTENTION

- the thickness of the cushion can naturally reduce by 5% in the initial period of use
- in case of considerable changes of temperature use pump again to obtain proper hardness (higher temperature softens the cushion, lower temperature hardens the cushion)

INSTRUCTIONS FOR USE

Hand pump

1. Take out tube in pump handle.
2. Screw tube into cushion valve and wait until cushion reaches the required softness.
3. Shape cushion (either manually to adjust shape or by sitting or leaning on it).
4. Screw pump into tube and deflate air until desired hardness has been reached.
5. Remove tube from pump and screw protecting cap on valve.
6. To change shape - screw tube into valve and wait until cushion softens, then repeat steps from 2 to 5.

Electric pump

1. Take out tube from box with electric pump.
2. Screw off valve cap, screw tube (tapped part) into cushion valve, and push second tube into SOFT socket in electric pump. Turn on pump and wait until cushion will be soft enough, then turn pump off.
3. Start shaping cushion (either manually to adjust shape or by sitting or leaning on it).
4. Change position of tube from SOFT to HARD and turn pump on removing air until the desired hardness has been reached.
5. Screw off tube, put cap back on and tighten.
6. To change the shape repeat steps from 2 to 5.

KONSERWACJA

- regularnie kontroluj stan wyrobu - zwracaj uwagę na pęknięcia i rozprucia
- przed myciem zakręć kapturek zaworka
- myj poduszkę ręcznie pod bieżącą wodą z zastosowaniem detergentu np. płynu do mycia naczyń
- pranie w pralce automatycznej jest możliwe w temp. do 40°C. Nie ma potrzeby używania proszku do prania, wystarczy płyn do płukania
- wytrzyj do sucha papierowym ręcznikiem
- możesz stosować powszechnie używane w szpitalnictwie środki dezynfekcyjne
- nie używaj środków na bazie rozpuszczalników, takich jak toluen lub aceton
- w wyrobach Velcro regularnie odkurzaj pluszową powierzchnię, aby nie utraciła właściwości przyczepnych

GWARANCJA

- producent udziela 24 miesięcznej gwarancji
- gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń Therapy Stabulo System
- w razie wątpliwości proszę skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z producentem
- wszelkie incydenty zgłaszać sprzedawcy lub bezpośrednio producentowi

DEKLARACJA PRODUCENTA

Próźniowy system pozycjonujący do stabilizacji tułowia, kończyn i głowy, Therapy Stabulo System spełnia wymagania zasadnicze Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.

MAINTENANCE

- regularly check condition of product – pay attention to any cracks and rips
- screw on valve cap before washing
- hand wash cushion under running water using a standard detergent, e.g. a washing up liquid
- suitable for washing in washing machine at 40°C cycle. Fabric softener is sufficient, does not require use of washing powder
- wipe dry with paper towel
- standard disinfectants used in hospitals can be used
- do not use solvent-based cleaners such as toluene or acetone
- for Velcro products, Hoover the soft surface regularly to prevent loss of adherence

WARRANTY

- the warranty is provided for a period of 24 months
- the warranty does not cover mechanical damage to Positioning Therapy Stabulo System
- if in doubt, please contact seller or manufacturer directly
- report any incidents to seller or manufacturer directly

DECLARATION OF CONFORMITY

Vacuum positioning system stabilizing torso, limbs and head, Therapy Stabulo System medical device complies with the basic requirements of the DRegulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices.

NOEL Żebrowski sp. j.
ul. Christo Botewa 4A, 30-798 Kraków
+48 12 341 53 16
www.stabulo.krakow.pl
stabulo@stabulo.krakow.pl

Find Stabulo System Cushions on:



Nr dok.IU/PTSS - PL/EN,
wyd. 3, rok 2022